



NILOCIN 3-i-1 Ligtorne Behandling

DK

Føtsende

Læs denne indlægsseddel grundigt inden brug

Nilocin® 3-i-1 benyttes til behandling af ligtorne. Benyt produktet med forsigtighed for at opnå det bedste resultat.

LIGTORNE

Ligtorne er mindre områder med fortykket hud, der oftest dannes som reaktion på tryk eller gnidning ved knogleområder. Huden fortykkes i et forsøg på at beskytte de underliggende strukturer. Ligtorne kan forekomme overalt på foden samt på hænder og de kan være både hårde eller bløde. En ligtor kan endvidere forekomme mellem tæerne hvor 2 led grides mod hinanden.

Midten af ligtornen er ofte lidt mørkere og har form som en torn. Når dette område udsættes for pres, kan ligtornen være meget smertefuld.

Seed corns er forskellige fra de traditionelle ligtorne, de findes oftest i små klynger på fodsålen, men kan også optræde enkeltvis. Denne type ligtorne er oftest ikke associeret med smerte, men kan føles som små glassplinter. Disse er ikke nødvendigvis relateret til tryk eller gnidning, men skyldes oftest mangel på hydrering.

NILOCIN®

Denne pakning indeholder:

- En 3 ml applikator pen.
- Hydrokolloid plastre (7).
- Denne indlægsseddel.

Nilocin® 3-i-1 ligtornebehandling er specifikt udviklet til behandling af ligtorne på fødder og hænder. Applicer ikke behandlingen til andre områder på kroppen, i ansigtet eller de genitale områder.

Nilocin® 3-i-1 absorberes straks og virker ved at blødgøre og nedbrude ligtornen. Behandlingen trænger ned i ligtornen, reducerer pH og behandler ligtornen indefra. Hydrokolloid plasteret øger hydrering og reducerer smerten.

Benyt ikke til børn under 4 år med mindre ordineret af læge.

Nilocin® 3-i-1 kan benyttes af gravide og ammende.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel. Diabetikere bør konsultere læge inden brug.

- Undlad at bruge Nilocin®, hvis du er overfølsom overfor indholdsstofferne, samt hvis du er overfølsom overfor bistik eller myrbebid.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om ligtornen.
- Anvend ikke Nilocin® 3-i-1 behandlingen på øm, blødende, irriteret, betændt eller beskadiget hud.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres ved tynd og følsom hud og når børn behandles. Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, hvis i tvivl.
- Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer.
- Konsulter læge såfremt det behandlede område bliver rødt, smertefuld eller betændt.

TEKNISKE DATA - Produkt: Nilocin® til behandling af ligtorne **Indholdsstoffer (INCI):** Formic acid (60%). Ethyl lactate. Plastre: Hydrokolloid **Indhold:** 3 ml - tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer **Registrering:** Nilocin® er certificeret og registreret som medicinsk udstyr klasse IIa **Opbevaring:** Opbevares i den originale emballage, ved 2-25° C, udenfor direkte sollys og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdagen eller 6 måneder efter første brug. Hætten påsættes omhyggeligt efter brug **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby **Yderligere information:** www.nilocin.com **Kontakt:** info@unigroup.dk

Enkelt patient flergangsbrug

• Benyt ikke Nilocin® i kombination med andre ligtorne behandlinger.

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE MED RIGELIGE MÆNGDER VAND. OG GENTAG I 15 MINUTTER. KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

SÅDAN BRUGES NILOCIN®

- Vask området og tør grundigt.
- Fjern hætten fra nilocin® pennen.
- Ligtornen masseres forsigtigt med spidsen af applikator pennen. Hele overfladen af ligtornen skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud.
- Påsæt et hydrokolloid plaster over det behandlede område. Vær omhyggelig med at sikre, at plasteret klæber til huden.
- Gentag behandlingen, hver anden dag i 14 dage.

Opstår der ubehag ved behandlingen, kan hudoverfladen neutraliseres med vand.



Nilocin® pennen leverer en lille mængde farveløs ætsende væske. Er du i tvivl om pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir, og der forekommer et vådt mærke.

BIVIRKNINGER

Det er vigtigt at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader.

Produktet har ingen kendte bivirkninger for gravide og ammende.


Ålvorlige hændelser bør indberettes til producent eller relevant myndighed.

OPBEVARING

Opbevares i den originale emballage, ved 2-25°C, udenfor direkte sollys og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hætten påsættes omhyggeligt efter brug.

Bortskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby.
Nilocin® er et af Unigroup ApS registreret varemærke.

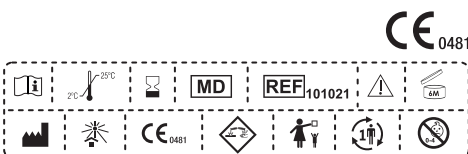

UG01042020-101021-DK



NILOCIN 3-i-1 Ligtorne Behandling

DK

Føtsende

Læs denne indlægsseddel grundigt inden brug

Nilocin® 3-i-1 benyttes til behandling af ligtorne. Benyt produktet med forsigtighed for at opnå det bedste resultat.

LIGTORNE

Ligtorne er mindre områder med fortykket hud, der oftest dannes som reaktion på tryk eller gnidning ved knogleområder. Huden fortykkes i et forsøg på at beskytte de underliggende strukturer. Ligtorne kan forekomme overalt på foden samt på hænder og de kan være både hårde eller bløde. En ligtor kan endvidere forekomme mellem tæerne hvor 2 led grides mod hinanden.

Midten af ligtornen er ofte lidt mørkere og har form som en torn. Når dette område udsættes for pres, kan ligtornen være meget smertefuld.

Seed corns er forskellige fra de traditionelle ligtorne, de findes oftest i små klynger på fodsålen, men kan også optræde enkeltvis. Denne type ligtorne er oftest ikke associeret med smerte, men kan føles som små glassplinter. Disse er ikke nødvendigvis relateret til tryk eller gnidning, men skyldes oftest mangel på hydrering.

NILOCIN®

Denne pakning indeholder:

- En 3 ml applikator pen.
- Hydrokolloid plastre (7).
- Denne indlægsseddel.

Nilocin® 3-i-1 ligtornebehandling er specifikt udviklet til behandling af ligtorne på fødder og hænder. Applicer ikke behandlingen til andre områder på kroppen, i ansigtet eller de genitale områder.

Nilocin® 3-i-1 absorberes straks og virker ved at blødgøre og nedbrude ligtornen. Behandlingen trænger ned i ligtornen, reducerer pH og behandler ligtornen indefra. Hydrokolloid plasteret øger hydrering og reducerer smerten.

Benyt ikke til børn under 4 år med mindre ordineret af læge.

Nilocin® 3-i-1 kan benyttes af gravide og ammende.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel. Diabetikere bør konsultere læge inden brug.

- Undlad at bruge Nilocin®, hvis du er overfølsom overfor indholdsstofferne, samt hvis du er overfølsom overfor bistik eller myrbebid.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om ligtornen.
- Anvend ikke Nilocin® 3-i-1 behandlingen på øm, blødende, irriteret, betændt eller beskadiget hud.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres ved tynd og følsom hud og når børn behandles. Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, hvis i tvivl.
- Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer.
- Konsulter læge såfremt det behandlede område bliver rødt, smertefuld eller betændt.

TEKNISKE DATA - Produkt: Nilocin® til behandling af ligtorne **Indholdsstoffer (INCI):** Formic acid (60%). Ethyl lactate. Plastre: Hydrokolloid **Indhold:** 3 ml - tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer **Registrering:** Nilocin® er certificeret og registreret som medicinsk udstyr klasse IIa **Opbevaring:** Opbevares i den originale emballage, ved 2-25° C, udenfor direkte sollys og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdagen eller 6 måneder efter første brug. Hætten påsættes omhyggeligt efter brug **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby **Yderligere information:** www.nilocin.com **Kontakt:** info@unigroup.dk

UG01042020-101021-DK